



ARGENTA

## Rodzaje butelek z podłożem hodowlanym w systemie BC 120 (Autobio)



- Butelki plastikowe – odporne na stłuczenia; ograniczony kontakt z materiałem zakaźnym
- Możliwy transport w poczcie pneumatycznej szpitalnej, bez specjalnych kontenerów
- Lekkie butelki – tańszy transport i utylizacja
- Każda butelka posiada indywidualny kod kreskowy
- Przechowywanie 2-25°C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego
- Na etykiecie butelki znajduje się wydrukowany znacznik (5 ml), pozwalający kontrolować ilość umieszczoną w butelce krwi/płynu – ważne, jeśli krew od pacjenta pobierana jest systemem otwartym

[ARGENTA.COM.PL](http://ARGENTA.COM.PL)



## Rodzaje butelek z podłożem hodowlanym w systemie BC 120 (Autobio)

Butelka	Nazwa butelki	Symbol	Kolor etykiety / korka	Ilość krwi do hodowli (ml)	Podłoże do hodowli mikroorganizmów
	Aerobic Culture Bottle FA (z neutralizatorem antybiotyków)	MC0301	zielony	8-10	tlenowych i fakultatywnie beztlenowych
	Anaerobic Culture Bottle FN (z neutralizatorem antybiotyków)	MC0302	jasno-niebieski	8-10	beztlenowych i fakultatywnie beztlenowych
	Aerobic Culture Bottle PF (z neutralizatorem antybiotyków)	MC0303	różowo-czerwony	0,5 - 5	tlenowych i fakultatywnie beztlenowych (podłoże pediatryczne)

### Do której butelki jako pierwszej należy pobierać krew/płyn?

#### ▪ System zamknięty

– pierwszą należy posiać butelkę do hodowli mikroorganizmów tlenowych, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do butelki z podłożem hodowlanym do mikroorganizmów beztlenowych

#### ▪ System otwarty

- przy użyciu igły i strzykawki; umieścić próbkę krwi/płynu butelce z podłożem do hodowli mikroorganizmów beztlenowych, w celu uniknięcia przedostania się powietrza

### Opisywanie butelek - identyfikacja pacjenta

Podstawą identyfikacji butelki w systemie BC120 jest kod kreskowy. Pełne dane pacjenta oraz czas i miejsce pobrania materiału należy umieścić w wyznaczonym polu (zdjęcie po lewej).

Zdjęcie po prawej wskazuje nieprawidłowe sposoby opisywania butelek danymi pacjentami.




Poprawnie



Nie poprawnie

### Kolorymetryczna metoda wykrywania wzrostu mikroorganizmów w systemie BC 120

- Wyspecjalizowany sensor - na dnie każdej butelki uwidacznia zmiany koloru (z fioletowego na żółty), pojawiające się w przypadku zmian pH, spowodowanych wytwarzaniem CO<sub>2</sub> przy wzroście drobnoustrojów
- Odczyt butelek w systemie BC 120 następuje co 10 minut
- Butelki powinny być umieszczane w aparacie jak najszybciej po pobraniu materiału klinicznego; producent dopuszcza opóźnienie w umieszczeniu butelki w aparacie do 24 godzin w temp. pokojowej

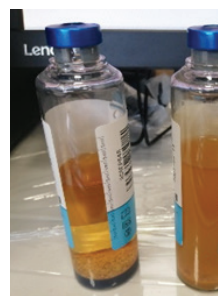

ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań  
t. +48 61 847 463 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl