



ARGENTA  
EKSPERCI Z MISJĄ

DIRUI

## Wysokoefektywne badanie moczu


H-500



ARGENTA.COM.PL



## H-500 ANALIZATOR BADANIA MOCZU

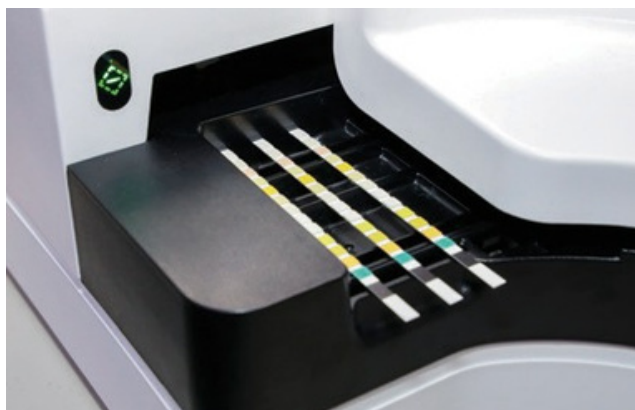

### Cechy produktu:

- Analiza 14 parametrów suchej chemii oraz obliczanie parametrów ACR i PCR. Łączenie wyników przy użyciu protokołu LIS z wynikami elementów morfotycznych dla pełnego obrazu diagnostycznego
- Zastosowanie zaawansowanego źródła zimnego światła o wysokiej jasności z 4 długościami fali, co zapewnia czułość, dokładność, specyficzność oraz obniża wpływ światła otoczenia
- Precyzyjne i wiarygodne wyniki badań dzięki nowej głowicy testowej, wychwytyjącej pola kolorowe, oraz zbieraniu większej liczby danych
- Skrócenie czasu oczekiwania dzięki powiadamianiu lampką kontrolną o gotowości urządzenia do umieszczenia paska testowego
- Automatyczne powiadamianie o usunięciu paska kalibracyjnego po kalibracji poprzez wykorzystanie czarno-białego paska kalibracyjnego
- Wykorzystanie ruchu w górę i w dół w systemie transportu pasków testowych, co zapobiega ich przechylaniu i gwarantuje precyzyjne i wiarygodne wyniki badań
- Automatyczne korygowanie wpływu pH, hemoglobiny i próbek o zmienionym kolorze
- Wbudowana szybka i cicha drukarka termiczna. Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki
- Możliwość połączenia z analizatorem osadu moczu
- Możliwość ustawienia przez użytkownika flagowania wartości nieprawidłowych
- Zmniejszenie zagrożenia aerozolu spowodowanego kontaktem pasków testowych z powietrzem po badaniu dzięki wbudowanemu pojemnikowi na odpady

### Specyfikacja techniczna:

- Parametry oznaczane: Urobilinogen (UBG), Bilirubina (BIL), Ketony (KET), Krew (BLD), Białko (PRO), Azotyny (NIT), Leukocyty (LEU), Glukoza (GLU), PH, Ciężar właściwy (SG), Witamina C (VC) (opcjonalnie), Mikroalbumina (MALB) (opcjonalnie), Kreatynina (Cr) (opcjonalnie), Wapń w moczu (Ca) (opcjonalnie)
- Długości fali: 525nm, 572 nm, 610 nm, 660nm
- Zasada pomiaru: kolometria fotoelektryczna
- Zastosowane paski: DIRUI H8, H10, H11 oraz H11 MA(N), H12, H13-Cr, H14-Ca
- Wydajność: 600 pasków/godzinę
- Pamięć urządzenia: 10 000 wyników pacjentów, 3 000 wyników kontroli jakości
- Interfejs urządzenia: Port RS-232
- Wyświetlacz: 7-calowy kolorowy ekran dotykowy
- Menu w języku polskim
- Źródło zasilania: ~220V 50Hz
- Pobór mocy 40VA
- Wymiary: 404×356×264 mm
- Waga: 8 kg
- Drukarka: wbudowana drukarka termiczna



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl