



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Monitoring higieny i środowiska produkcji

System EnSURE™ Touch – pomiar pozostałości ATP



Szybkie, powtarzalne i dokładne wyniki



Usprawnienie wewnętrznego systemu kontroli jakości



Łatwa obsługa w rękawiczkach 5-calowego ekranu dotykowego



SureTrend – inteligentna analiza danych, monitoring trendów i zarządzanie bezpieczeństwem produkcji z dowolnego miejsca



System EnSURE™ Touch – pomiar pozostałości ATP

System EnSURE™ Touch:

- Najbardziej czuły system monitorowania ATP na rynku – wykrywa już 0.1 femtomola ATP
- 5-calowy, odporny na stłuczenia ekran dotykowy, kompatybilny z rękawiczkami
- Niewielkie wymiary zapewniają poręczność i łatwość transportu
- Ustawienia zabezpieczeń rozróżniają operatorów i administratorów
- Akumulator litowo-jonowy ładowany przy pomocy USB-C
- Łatwa do czyszczenia komora pomiarowa

SureTrend Data Analysis Software

Inteligentna platforma do łatwego gromadzenia, integracji i analizy danych z wielu testów i urządzeń, umożliwiającą monitorowanie trendów oraz zarządzanie bezpieczeństwem produkcji z dowolnego miejsca.



Dostępne wymazówki:

Wymazówki ze wstępnie zwilżoną końcówką, zawierają unikalny, stabilny odczynnik (lucyferaza/lucyferyna) w formie płynnej, co wpływa na większą dokładność oraz lepszą odtwarzalność wyników. Odczynnik jest łatwy w uwolnieniu a także odporny na środki dezynfekujące i ekstremalne wartości pH.

UltraSnap® Surface ATP Test

- Uniwersalna wymazówka do wykrywania pozostałości ATP
- Prosty w obsłudze test do stosowania na każdej powierzchni w przemyśle spożywczym



SuperSnap® High Sensitivity ATP

- Najczulszy test do wykrywania ATP – o 4 razy bardziej czuły
- Umożliwia detekcję ekstremalnie niskich poziomów ATP w badanej próbce


AquaSnap®, AquaSnap™ Total, AquaSnap™ Free

- wykrywanie ATP w roztworach wodnych
- AquaSnap™ Total wykrywa całkowite ATP; komórki żywe, materię organiczną, komórki nieżywotne i niebakteryjne
- AquaSnap™ Free mierzy wyłącznie wolne ATP, nie pochodzące z drobnoustrojów



Procedura

1. Pobierz wymaz
2. Umieść pióro w probówce
3. Naciśnij i uwolnij odczynnik
4. Delikatnie wstrząśnij
5. Umieść pióro w luminometrze
6. Odczytaj wynik

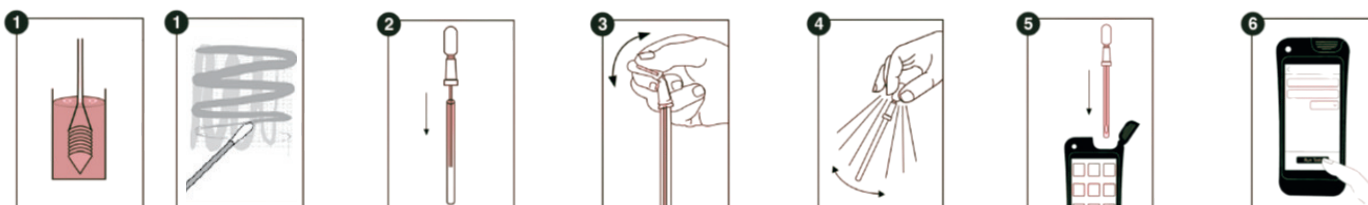

ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl